

Nouveau



# element DCX

Analyseur de biochimie vétérinaire

Profitez d'analyses de biochimie à l'interne avec un analyseur conçu pour les cabinets qui exigent vitesse, facilité d'utilisation et précision.

Nos technologies de lame sèche et d'électrode ion sélective (ISE) vous apportent, dans votre propre cabinet, des résultats d'une qualité égale à celle des laboratoires de référence, en plus d'économies marquées à réinvestir dans votre clinique et dans vos patients. Les listes de travail, pointes préchargées et panels eWrapMC pratiques vous permettent de revenir plus rapidement au soin de vos patients. Donnez à votre clinique une bonne dose de commodité, de vitesse et de confiance.

Technologie à lames sèches

Résultats d'électrolytes de qualité de laboratoire de référence (ISE)

Interface intuitive tactile de 17,7 cm

Dilution automatique



# Fonctionnement facile

Processus simplifié en trois étapes

# Pratique



1 Mettez en place les lames



2 Mettez en place les échantillons



3 Appuyez sur la touche de démarrage



Pointes préchargées, contenants de mélange et plus

## Caractéristiques :

### Haute efficacité

- Préchargez 12 pointes de pipette à la fois
- Dilution entièrement automatique
- Liste de travail pour simplifier la saisie de données

### Technologie à lames sèches digne de confiance

- Menu de tests bien fourni et personnalisable
- Précision et répétabilité sans égales
- Panels préemballés pour plus de commodité

### Facilité d'utilisation

- Insérez le panel eWrap dans le support d'échantillons, tirez la languette et allez-y!
- Technologie de laboratoire de référence sur un analyseur interne
- Fonction de capsulage automatique pour préserver la continuité de la solution RE

### Dimensions (LxPxH)

- 470 mm x 360 mm x 370 mm (18,5 x 14,2 x 14,6 po)

10  $\mu$ L par test


## Échantillons de petite taille

Convient bien aux patients juvéniles ou exotiques

DCX

PARAMÈTRES INDIVIDUELS*	Profils eWrap préchirurgical/bien-être	Profils eWrap complet	Profils Comp+ eWrap	PLUS	Foie	Reins	Équins
ALT	•	•	•		•		
ALP	•	•	•		•		
GGT		•	•		•		•
TBIL		•	•		•		•
AST		•	•	•			•
BUN	•	•	•			•	•
CREA	•	•	•			•	•
PHOS		•	•			•	•
GLU	•	•	•		•		•
TP	•	•	•			•	•
ALB		•	•		•	•	•
Ca		•	•			•	•
CHOL		•	•				
Mg			•	•			
AMY			•	•			
LDH							•
LIP			•	•			
TCO <sub>2</sub>							
TRIG			•	•			
CK							•
URIC							
NH <sub>3</sub>							
Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Cl <sup>-</sup> (1 Slide)			•	•			
<b>CALCULATED PARAMETERS</b>							
GLOB		•	•			•	•
ALB : GLOB		•	•			•	•
BUN : CREA	•	•	•			•	•
Na : K			•	•			


## Interface multifonctionnelle tactile intuitive :

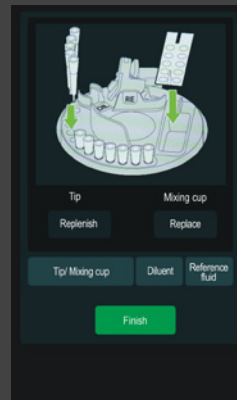

Préparation



Résultats

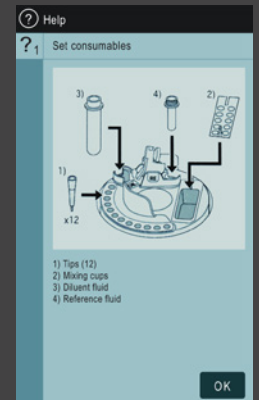


Aide

### Panel Comp+<sup>MC</sup> eWrap<sup>MC</sup>

...le panel en clinique le plus pratique et le plus complet.

Il suffit de le charger!

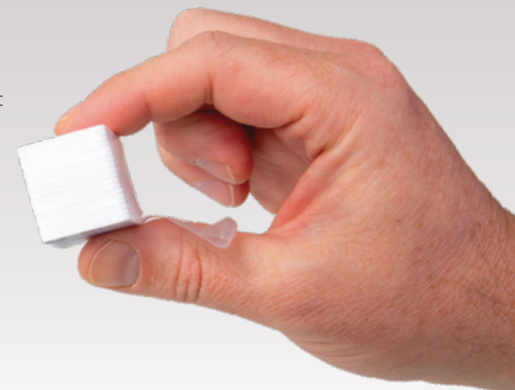

www.heskavet.ca 866-382-6937

©2021 Heska Corporation. HESKA est une marque déposée et Element DCX, Comp+, et eWrap sont des marques de commerce d'Heska Corporation. FUJIFILM est une marque déposée de FUJIFILM Corporation. Tous les paramètres individuels sont offerts en lames individuelles. Les spéci-cations et l'aspect peuvent changer sans préavis. CA20LT0702\_002

